


Tipps & Tricks zum SKYRIZI® Dosiergerät

Skyrizi®
(risankizumab)

Dieses Poster ersetzt nicht die Packungsbeilage. Bitte lesen Sie diese vor jeder Injektion vollständig durch. Das Poster ist für Patientinnen und Patienten vorgesehen, die sich mit ihrer Ärztin/ihrer Arzt für SKYRIZI® entschieden haben.


1. Temperaturanpassung

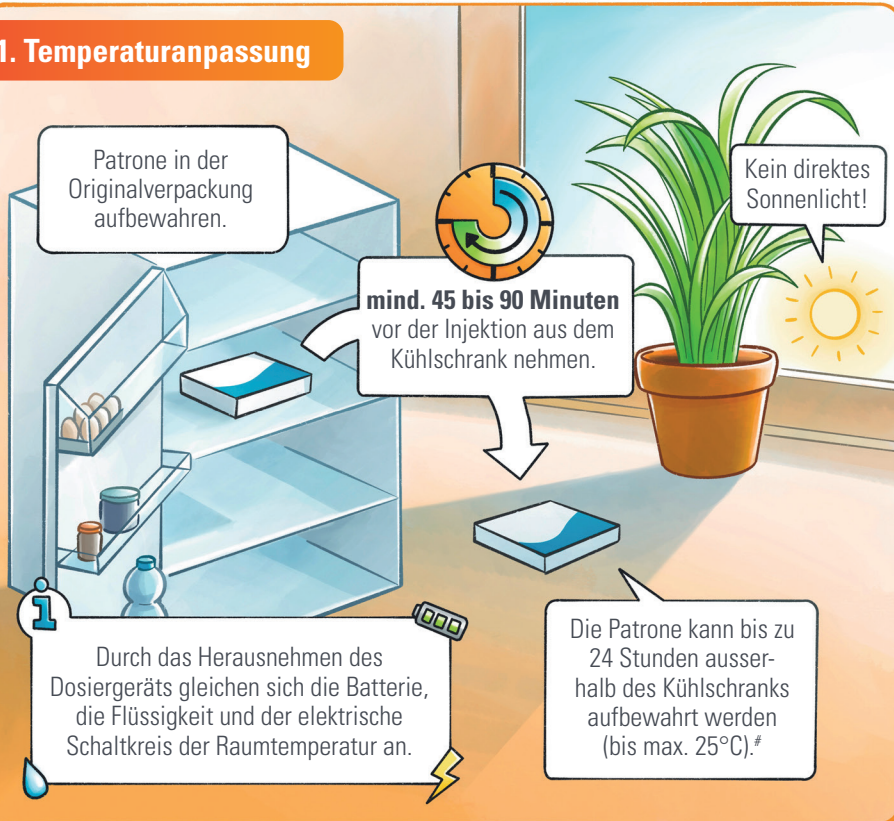

2. Patrone




3. Geeignete Injektionsstellen

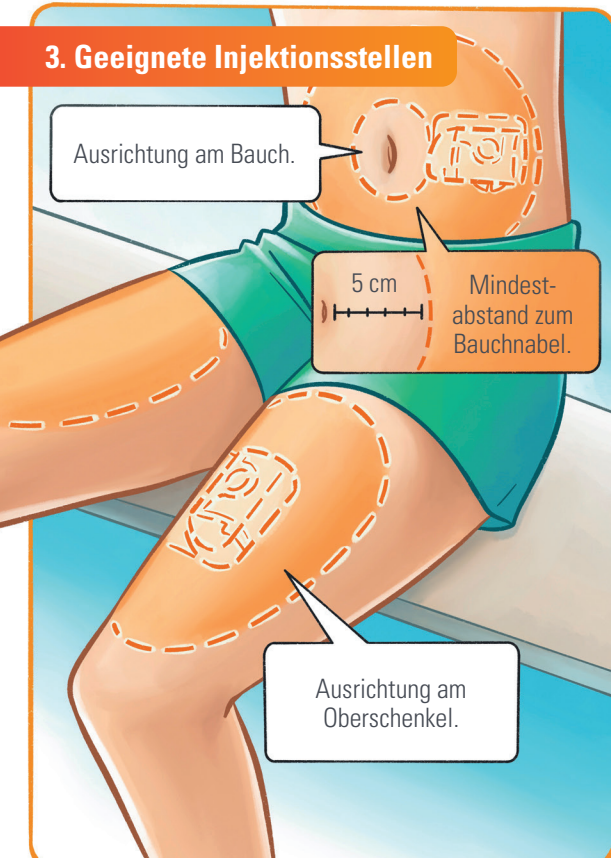

Injektionsstelle reinigen.



Beide Laschen abziehen, um das Haftmaterial freizulegen. Danach schnell anbringen!

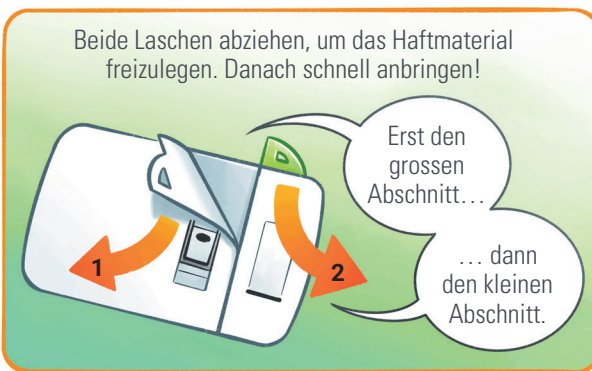

4. Sicherer Halt und Knopf klicken



Sie finden die Patienteninformation mit den kompletten Anwendungshinweisen als Packungsbeilage, oder auf www.swissmedinfo.ch.

* Falls das Klick-Geräusch nicht hörbar war, sicherstellen, dass die Patrone vollständig eingesetzt ist.

Bei Fragen rund um die Lagerung des Dosiergeräts wenden Sie sich an den Abgabeort Ihres Dosiergeräts (Apotheke, Praxis, Spital).

QR-Code zum
Anwendungsvideo

