


Préparation de l'injection de TREMFYA®¹


1.

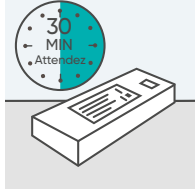

Vérifiez que le carton ne présente pas de dommages, contrôlez la date de péremption et laissez TREMFYA® à température ambiante pendant environ 30 minutes avant utilisation.

Ne pas réchauffer d'une quelconque autre manière. Ne pas secouer.


3.

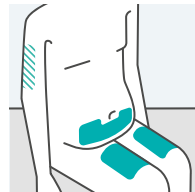

Choisissez un site d'injection : face avant des cuisses (recommandé), bas-ventre ou arrière des bras (si un soignant effectue l'injection). N'injectez pas sur une peau sensible, blessée, rouge, squameuse ou durcie, ni sur une zone présentant des cicatrices ou des vergetures.

N'injectez pas à moins de 5 cm du nombril.

2.

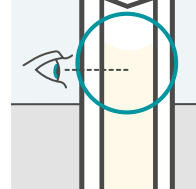

Vérifiez le liquide dans le dispositif. Il doit être incolore à jaune pâle et peut contenir de minuscules particules blanches ou translucides. Des bulles d'air peuvent également être visibles.

Ne pas utiliser si la solution est trouble, présente une coloration ou de grosses particules.

4.




Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau chaude et nettoyez le site d'injection avec un coton imbibé d'alcool. Laissez sécher sans souffler dessus ni éventer.

Comment administrer TREMFYA®¹

Stylo prérempli


1.

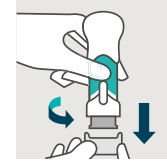

Retirez le capuchon en le tournant

- Ne remettez pas le capuchon
- Ne touchez pas le protège-aiguille.
- Injectez TREMFYA® dans les 5 minutes suivant le retrait du capuchon.
- Si vous faites tomber le stylo prérempli, ne l'utilisez pas.


2.

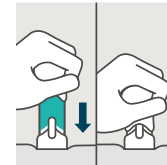

Positionnez le stylo prérempli sur la peau et appuyez vers le bas

- Placez le stylo sur la peau perpendiculairement au site d'injection.
- L'injection commence dès que vous enfoncez le stylo, modulez la rapidité d'injection comme vous le souhaitez.
- Maintenez la pression jusqu'à ce que toute la dose soit injectée. Ne soulevez pas le stylo pendant l'injection, sinon le protège-aiguille s'enclenchera et la dose complète ne pourra pas être injectée.


3.

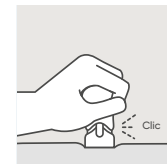

Injection complète

- La dose complète a bien été injectée lorsque*
- vous entendez un clic
 - et que le boîtier vert disparaît.

4.

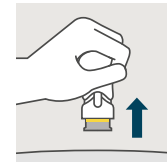


Retirez le stylo prérempli

Une bande jaune indique que le protège-aiguille est enclenché.

Stylo prérempli « PushPen »


1.

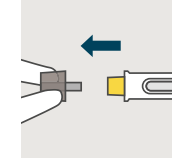

Tournez et retirez le capuchon du PushPen

- Ne touchez pas le protège-aiguille jaune !
- Injectez TREMFYA® dans les 5 minutes après avoir retiré le capuchon.
- Tirez sur le capuchon de fermeture. Si vous voyez quelques gouttes de liquide, c'est normal.
- Ne remettez pas le capuchon en place, cela pourrait endommager l'aiguille.
- N'utilisez pas le PushPen s'il est tombé.


2.

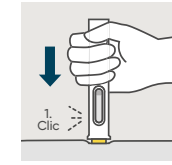

Positionnez le PushPen, appuyez et attendez le premier clic

- Ne soulevez pas le PushPen pendant l'injection !
- Placez le PushPen directement sur le site d'injection, de manière à ce que le protège-aiguille jaune soit en contact avec la peau et que la fenêtre de contrôle soit bien visible.
- Poussez le PushPen vers le bas et maintenez-le contre la peau jusqu'à entendre le premier clic.


3.

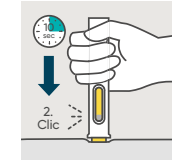

Attendre le second clic

- Maintenez le PushPen contre la peau pendant une dizaine de secondes jusqu'à entendre le deuxième clic.

4.

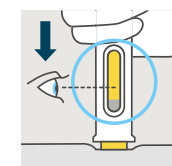


Maintenez le PushPen contre la peau et vérifiez la fenêtre de contrôle

- L'injection est terminée une fois que la tige du piston ne bouge plus et occupe toute la fenêtre de contrôle. Vous pouvez alors retirer le PushPen.

Seringue préremplie


1.

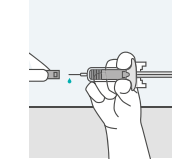

Retirez le protège-aiguille

- Injectez TREMFYA® dans les 5 minutes après avoir retiré le protège-aiguille.
- Si la solution goutte, c'est normal.
- Ne remettez pas le protège-aiguille.
- Ne touchez pas l'aiguille.
- N'utilisez pas la seringue préremplie si elle est tombée.


2.

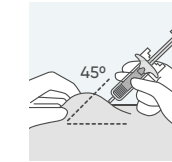

Prenez un pli de peau et introduisez l'aiguille

- Tenez la seringue préremplie entre le pouce, l'index et le majeur, comme illustré.
- De l'autre main, formez un pli de peau.
- Introduisez rapidement l'aiguille de la seringue préremplie dans la peau à un angle de 45°.


3.

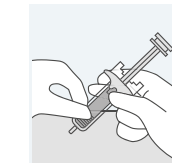

Relâchez le pli de peau et repositionnez la main

- Tenez le corps de la seringue avec la main libre.


4.

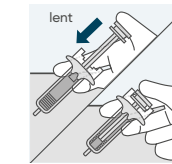

Injectez

- Poussez lentement le piston vers le bas jusqu'à la butée.

5.

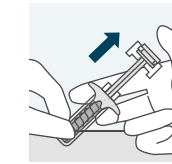


Enclenchez le protège-aiguille

- Relâchez le piston.
- Le protège-aiguille retire l'aiguille de la peau. Il la recouvre entièrement et la bloque.


Après l'injection de TREMFYA®¹

1.

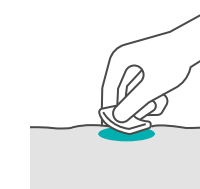

- Une petite quantité de sang ou de solution d'injection peut être visible.
- Appuyez sur la zone avec la gaze ou le coton jusqu'à ce que le saignement s'arrête.
- Contentez-vous d'appuyer, ne frottez pas.
- Au besoin, utilisez un pansement.

2.

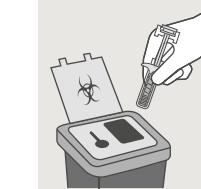

- Tous les produits TREMFYA® sont à usage unique.
- Éliminez le dispositif d'injection usagé directement après injection dans un récipient résistant à la perforation.
- Ne jetez pas vos médicaments avec les eaux usées ou les déchets ménagers.

Vos patients peuvent nous renvoyer la seringue préremplie / le stylo prérempli TREMFYA® usagé simplement et gratuitement avec SafeReturns. L'inscription se fait sur : www.safereturns.ch



Attention : Si la dose qui vous a été prescrite nécessite deux injections, répétez les étapes ci-dessus avec la deuxième seringue préremplie ou le deuxième PushPen. Choisissez une autre zone d'injection située à au moins 5 cm de la première zone.

